



EquiAirLite



EquiAirLite

Instrukcja obsługi





Serdecznie gratulujemy zakupu
inhalatora EquiAirLite!

Cieszymy się, że wybrali Państwo
nowoczesne, przyjazne dla koni i łatwe
w obsłudze rozwiązanie do inhalacji.
Niniejsza instrukcja obsługi pomoże
Państwu optymalnie i bezpiecznie
korzystać z urządzenia EquiAirLite.

SPIIS TREŚCI

MISJA I WIZJA

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

PRZEGLĄD PRODUKTU

WSKAZÓWKI BEZP.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

URUCHOMIENIE

CZYSZCZENIE

ŁADOWANIE AKUMULATORA

WYMIANA MEMBRAN

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DANE TECHNICZNE

GWARANCJA

KONTAKT

02

02

03


04

05

06



MISJA & WIZJA

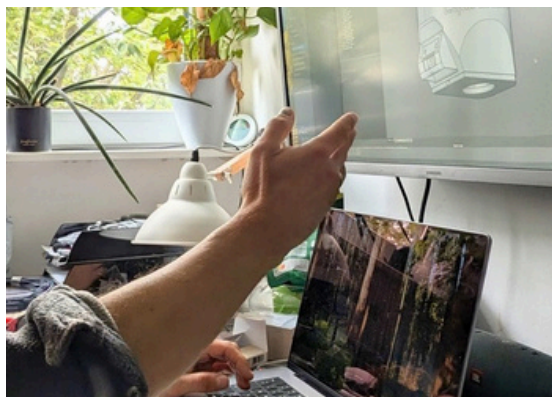

CHCIELIŚMY STWORZYĆ INHALATOR DLA KONI, KTÓRY KONSEKWENTNIE WYELIMINUJE LUB PRZYNAJMNIEJ DRASTYCZNIE ZREDUKUJE WSZYSTKIE TE „PAIN POINTS” – CZYLI NAJWIĘKSZE BOLĄCZKI.

Jako wieloletni właściciele koni i jeźdźcy, których własny koń cierpi na astmę, aż za dobrze znamy wyzwania i zmartwienia wiążące się z chorobami dróg oddechowych u naszych czworonożnych przyjaciół.

Z biegiem czasu wypróbowaliśmy liczne urządzenia do inhalacji różnych producentów i wciąż natrafialiśmy na te same frustrujące przeszkody: urządzenia, które były nieporęczne i ciężkie, inne, które ograniczały swobodę ruchów przez kable i węże,

a także wiele takich, które były nie tylko drogie w zakupie, ale również obciążały budżet z powodu kosztownych części eksploatacyjnych.

Te osobiste doświadczenia stały się iskrą zapalną do powstania EquiAirLite.

Nasza misja od samego początku była jasno określona: chcieliśmy stworzyć inhalator dla koni, który konsekwentnie wyeliminuje lub przynajmniej drastycznie zredukuje wszystkie te „pain points” – czyli wspomniane bolączki.

MISJA & WIZJA

Koniec z plątaniem kabli i węży, które mogłyby irytować konia, a nawet stwarzać dla niego zagrożenie. Chcieliśmy stworzyć urządzenie, które jest nie tylko skuteczne, ale również wystarczająco wytrzymałe na codzienne warunki w stajni, łatwe w obsłudze, a przy tym minimalizujące koszty bieżące – na przykład dzięki pojemnemu zbiornikowi na leki, który eliminuje konieczność ciągłego uzupełniania.

Naszą wizją jest uczynienie terapii inhalacyjnej dla koni i ich właścicieli tak bezstresową, przyjemną i skuteczną, jak to tylko możliwe. Inhalator EquiAirLite jest owocem tej wizji:

To ultralekki (< 950 g), zasilany akumulatorowo system pozbawiony węży, który zapewnia prawdziwą swobodę ruchów. Dzięki odpornej na wstrząsy obudowie, bardzo dużemu zbiornikowi XXL o pojemności 50 ml umożliwiającemu długie sesje terapeutyczne oraz innowacyjnej technologii nebulizatora z podwójną siateczką (Doppel-Mesh) dla optymalnego wchłaniania substancji czynnych głęboko w płucach, nasz inhalator wyznacza nowe standardy.

Niemal bezgłośnie działanie (< 35 dB) oraz łatwe czyszczenie – przetestowane przez właścicieli koni dla właścicieli koni – dopełniają całości.

W EquiAirLite głęboko wierzymy, że najlepsza technologia powstaje z praktyki dla praktyki. Dlatego zebraliśmy całe nasze doświadczenie oraz opinie wielu osób borykających się z podobnymi problemami, aby stworzyć produkt, który w równym stopniu zaspokaja potrzeby koni i ludzi.

Od funkcji szybkiego ładowania przez USB, po możliwość stosowania różnych substancji czynnych, takich jak sól fizjologiczna, solanka czy popularne leki – każdy szczegół został przemyślany tak, aby jak najlepiej wspierać zdrowie i dobre samopoczucie Państwa konia oraz ułatwić Państwu codzienność.

POZNAJ NAS


ZA EQUIAIRLITE STOI NIE TYLKO INNOWACYJNY POMYSŁ I PRZEMYŚLANY PRODUKT, ALE PRZED E WSZYSTKIM DWÓJKA LUDZI, KTÓRZY POŁĄCZYLI SVOJE OSOBISTE DOŚWIADCZENIA I PASJĘ DO KONI.



CAMILLA TRANDA

Founder

Camilla jest doświadczoną amazonką i ekspertką od koni, która poprzez swoje bezpośrednie doświadczenia związane z astmą jej własnego konia dała impuls do stworzenia naszego inhalatora. Jej głębokie zrozumienie potrzeb koni oraz praktycznych wymagań związanych z codziennym życiem w stajni stanowią serce naszej filozofii produktu i gwarantują, że EquiAirLite naprawdę robi różnicę.

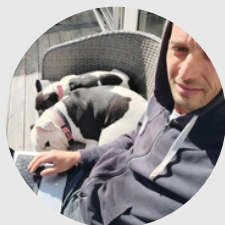

PRZEMEK TRANDA


Founder

Jako innowator techniczny zaprojektował i opracował inhalator EquiAirLite od samych podstaw. Oprócz ciągłej optymalizacji technicznej zajmuje się produkcją, sklepem internetowym i dba o to, aby nasze przesłanie oraz zalety naszego inhalatora docierały do Państwa za pośrednictwem naszych działań reklamowych.

W ZESTAWIE


Po rozpakowaniu prosimy sprawdzić zawartość pod kątem kompletności:

1. Maska inhalatora EquiAirLite
2. Nakładka nebulizatora i jednostka sterująca
3. Kabel USB (typ C)
4. Akumulator
5. Opakowanie jednorazowych myjek
6. Woda destylowana 500 ml (np. marki B. Braun)
7. Roztwór do inhalacji NaCl 0,9% 500 ml (np. marki B. Braun)
8. Pudełko transportowe
9. Regulowany pasek na kark
10. 2x pasek do kantara z karabińczykami
11. Płyn do higienicznego czyszczenia Frosch 300 ml

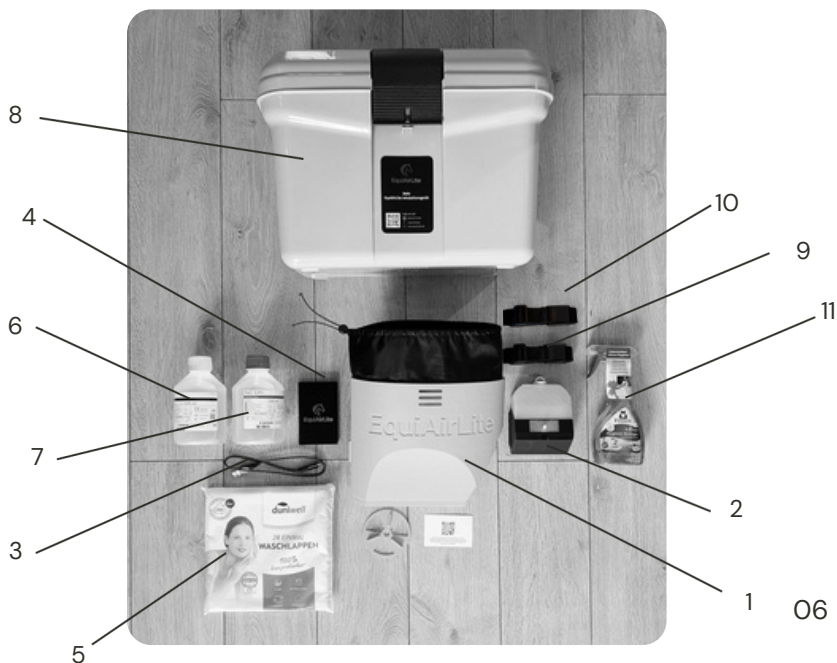

PRZEGLĄD PRODUKTU

1. Maska inhalatora EquiAirLite
2. Nakładka nebulizatora ze zintegrowanym zbiornikiem na leki XXL (50 ml) i nebulizatorem z podwójną siateczką (Doppel-Mesh)
3. Zintegrowana jednostka sterująca ze wskaźnikiem stanu LED
4. Kanał na kabel USB
5. Akumulator
6. Regulowany pasek z karabińczykiem (2x)
7. Pokrywa zbiornika na leki
8. Uszczelka materiałowa

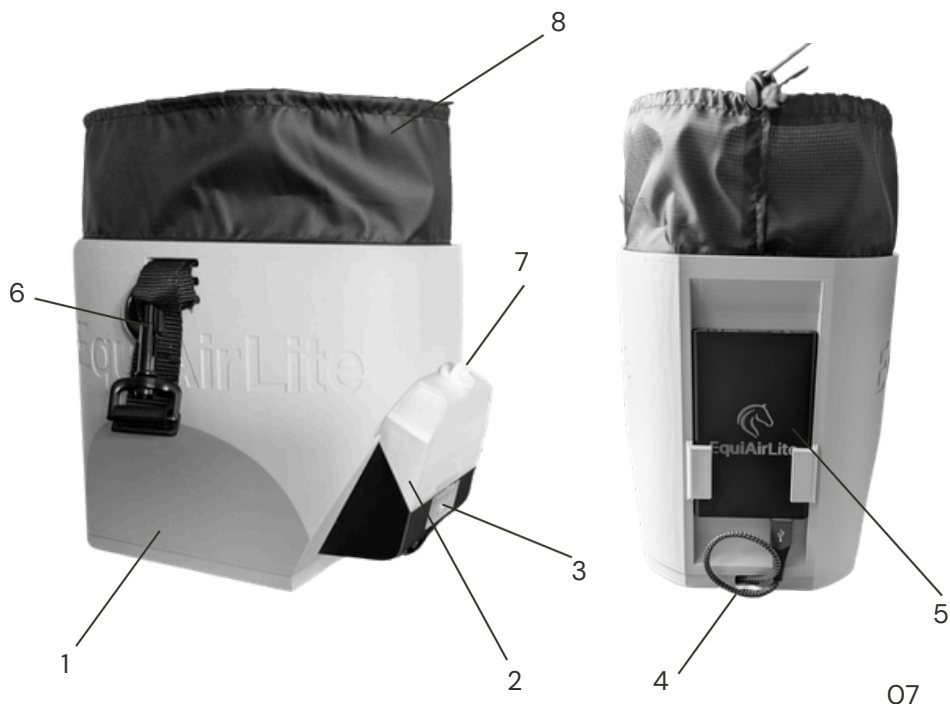

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych wskazówek bezpieczeństwa przed użyciem inhalatora EquiAirLite. Instrukcję należy zachować.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem: Inhalator EquiAirLite jest przeznaczony wyłącznie do terapii inhalacyjnej u koni. Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i może prowadzić do powstawania zagrożeń.

Konsultacja weterynaryjna: Inhalatora należy używać wyłącznie po konsultacji z lekarzem weterynarii. Należy przestrzegać jego zaleceń dotyczących stosowanych roztworów do inhalacji, dawkowania oraz czasu trwania terapii.

Roztwory do inhalacji: Należy napełniać urządzenie wyłącznie płynami zaleconymi przez weterynarza lub takimi, które nadają się do nebulizacji za pomocą nebulizatorów siateczkowych (Mesh). Nie należy używać substancji oleistych, leków na bazie proszku ani substancji nieprzeznaczonych do nebulizacji, ponieważ może to uszkodzić nebulizator i/lub być szkodliwe dla konia. Należy przestrzegać zaleceń producenta roztworu do inhalacji.

Dzieci i zwierzęta: Inhalator oraz wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i innych zwierząt. Drobne części mogą zostać połknięte.

Uszkodzenia: Przed każdym użyciem należy sprawdzić inhalator pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie należy używać urządzenia, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

Elektronika: Jednostka sterująca zawiera elementy elektroniczne. Urządzenie należy chronić przed wodą, skrajną wilgotnością, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz ekstremalnymi temperaturami. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Akumulator: Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB lub kabla USB typu C z odpowiednim zasilaczem sieciowym USB. Nigdy nie należy otwierać obudowy jednostki sterującej.

Czyszczenie: Inhalator należy czyścić zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe czyszczenie może negatywnie wpłynąć na jego działanie.

Obsługa: Mimo że EquiAirLite ma solidną konstrukcję, należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie należy upuszczać urządzenia.

Ważna wskazówka dotycząca przechowywania zimą: W przypadku temperatur spadających zimą poniżej 10°C, zalecamy przechowywanie nebulizatora w domu w temperaturze pokojowej.

Suszenie resztek wilgoci (po czyszczeniu/płukaniu wodą destylowaną) może odbywać się w temperaturze do 35°C, pod warunkiem, że korek zamykający jest zdjęty.

PRZED 1. UŻYCIEM

Przyzwyczajanie konia do inhalatora ma kluczowe znaczenie dla bezstresowej terapii. Zaplanuj na to odpowiednią ilość czasu.

- Pierwszy kontakt: Pokaż koniowi maskę w spokojnym otoczeniu. Pozwól mu ją dokładnie powąchać i zbadać.
- Delikatne zakładanie: Spróbuj delikatnie i bez nacisku nasunąć maskę na chrapy konia. Mocno chwal konia za spokojne zachowanie.
- Krótki czas trwania: Zaczynij od bardzo krótkich sesji noszenia. Zdejmij maskę, zanim koń wykaże oznaki dyskomfortu.
- Pozytywne wzmocnienie: Połącz noszenie maski z czymś pozytywnym, np. niewielką ilością ulubionego przysmaku (po konsultacji z weterynarzem) lub głaskaniem po zdjęciu maski.
- Pasek do kantara / pasek na kark: Gdy koń zaakceptuje maskę, załóż mu pasek na kark lub pasek do kantara. Upewnij się, że przylega on wystarczająco stabilnie, aby zapobiec zsuwaniu się, ale nie jest zbyt ciasny.
- Powtarzanie: Powtarzaj te kroki przez kilka dni, aż koń ze spokojem zaakceptuje maskę. Nigdy do niczego konia nie zmuszaj.

URUCHOMIENIE

Przygotowanie inhalatora

Upewnij się, że akumulator inhalatora jest odpowiednio naładowany (patrz rozdział „Ładowanie akumulatora”). Sprawdź, czy nakładka nebulizatora oraz zbiornik są czyste (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Napełnianie zbiornika na leki

1. Otwórz pokrywę zbiornika na leki znajdującą się na górze nakładki nebulizatora.
2. Ostrożnie wlej roztwór do inhalacji zalecony przez weterynarza (np. NaCl 0,9% lub leki) do 50-mililitrowego zbiornika XXL. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia, jeśli jest zaznaczony. Wskazówka: Dołączony do zestawu roztwór NaCl 0,9% oraz woda destylowana stanowią wyposażenie początkowe, używane do inhalacji i czyszczenia (woda).
3. Starannie zamknij pokrywę zbiornika na leki, aby zapobiec wyciekowi płynu.

Zakładanie maski

1. Ustaw się z boku głowy swojego konia.
2. Mów do konia uspokajającym tonem.
3. Delikatnie nasuń maskę EquiAirLite od przodu na chrapy konia, tak aby były one całkowicie zakryte.
4. Przymocuj maskę do kantara za pomocą karabińczyków lub poprowadź pasek na kark za potylicą i go zapnij. Dopasuj długość paska tak, aby maska leżała stabilnie i wygodnie, nie zsuwając się ani nie uciskając.



URUCHOMIENIE

Montaż nakładki nebulizatora

Aby bezpiecznie połączyć nakładkę nebulizatora z maską inhalacyjną, użyj prowadnic znajdujących się z przodu. Wsuń nakładkę nebulizatora z góry na dół, używając lekkiego nacisku. Podłącz kabel USB-C.

Rozpoczynanie i kończenie inhalacji

Rozpoczęcie: Włącz akumulator (patrz zdjęcie, rozdział „Ładowanie akumulatora”). Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na panelu sterującym. Wskaźnik stanu LED zaświeci się, a nebulizacja rozpocznie się niemal bezgłośnie (< 35 dB). Możesz zaobserwować delikatną mgiełkę wydobywającą się w okolicach chrap.

Czas trwania: Poddawaj konia inhalacji przez czas zalecony przez weterynarza. Dzięki zbiornikowi XXL o pojemności 50 ml możliwe są również dłuższe sesje terapeutyczne bez konieczności dolewania płynu.

Obserwacja: Pozostań przy koniu przez cały czas trwania inhalacji i obserwuj go.

Zakończenie: Naciskaj przycisk włączania/wyłączania i przejdź przez każdy z trybów działania (są 3) aby zatrzymać nebulizację. Wskaźnik LED zgaśnie.

Zdejmowanie: Rozepnij pasek na kark (lub odepnij paski do kantara za pomocą karabińczyków) i ostrożnie zdejmij maskę z głowy konia. Pochwal swojego konia.

URUCHOMIENIE

- 1. Krótkie kliknięcie:** Ten tryb aktywuje pracę z podwójną membraną. Obie membrany pracują jednocześnie, a wszystkie 3 diody LED świecą światłem ciągłym.
- 2. Dwukrotne kliknięcie:** Włącza tryb naprzemienny. Lewa i prawa membrana pracują na przemian lub z mocą 50% obie, co może wydłużyć żywotność nebulizatora. Diody LED świecą na przemian po lewej i prawej stronie (może to być słabo widoczne). Środkowa dioda LED również świeci.
- 3. Trzykrotne kliknięcie:** Aktywuje tryb interwałowy. Nebulizator pracuje w określonych odstępach czasu (interwałach), a dioda LED odpowiednio miga.
- 4. Aby wyłączyć nebulizator,** po prostu naciśnij przycisk jeszcze raz.



3 LEDy świecą
(Tryb 1)



2 LEDy świecą
naprzemiennie, lewa i
prawa (Tryb 2)



Środkowy LED
miga (Tryb 3)

Ważne: Włączenie następuje poprzez krótkie naciśnięcie przycisku.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie nakładki nebulizatora i zbiornika

Wykonuj te czynności bezpośrednio po każdej inhalacji:

1. Opróżnij zbiornik z ewentualnych resztek roztworu do inhalacji.
2. Kilkakrotnie i dokładnie wypłucz zbiornik na leki oraz wewnątrz dołączoną do zestawu wodą destylowaną.
3. **Opcjonalnie:** Wlej niewielką ilość wody destylowanej do zbiornika i włącz nebulizator na ok. 10–15 sekund, aby przepłukać drobne kanały nebulizatora siateczkowego. Wylej resztkę wody.
4. Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania pozostaw nakładkę nebulizatora i zbiornik z otwartą pokrywą na powietrzu do całkowitego wyschnięcia. Nie dotykaj bezpośrednio membrany siateczkowej (Mesh).

Staranne czyszczenie po każdym użyciu ma kluczowe znaczenie dla higieny, prawidłowego działania oraz długiej żywotności inhalatora EquiAirLite.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie maski oraz paska na kark / paska do kantara

Maska: Przetrzyj wewnętrzną i zewnętrzną stronę maski za pomocą jednej z dołączonych do zestawu kompostowalnych jednorazowych myjek oraz czystej wody. W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć również łagodnego roztworu mydła lub płynu do higienicznego czyszczenia Frosch. Upewnij się, że wszystkie pozostałości mydła lub środka czyszczącego zostały dokładnie usunięte. Dobrze osusz maskę.

Pasek na kark / pasek do kantara: W razie potrzeby paski można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła. Dobrze wypłucz i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

Przechowywanie

Inhalator EquiAirLite oraz akcesoria należy przechowywać czyste i suche w dołączonym do zestawu pudełku transportowym. Urządzenie należy przechowywać w umiarkowanych temperaturach i chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, mrozem oraz wilgocią.

AKUMULATOR

Państwo inhalator EquiAirLite jest wyposażony w trwały akumulator, który można łatwo ładować przez USB.

Proszę podłączyć kabel USB (wtyczka USB-C) do dołączonego akumulatora oraz odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (np. od smartfona). Można również użyć kabla USB-C – USB-C, jeśli zasilacz na to pozwala.

Wskaźnik stanu LED na akumulatorze pokazuje proces ładowania (miganie podczas ładowania, 4 świecące diody LED przy w pełni naładowanym akumulatorze). Po pełnym naładowaniu należy odłączyć kabel USB i podłączyć nakładkę nebulizatora do akumulatora.

Wskazówka: Aby zmaksymalizować żywotność akumulatora, należy unikać jego całkowitego (głębokiego) rozładowania. Akumulator należy naładować, gdy jego wydajność zauważalnie spadnie lub gdy zasygnalizuje to dioda LED.

Wskazówka: Prosimy nie używać szybkich ładowarek (tzw. **fast chargers**). Zamiast tego należy korzystać ze standardowych ładowarek, aby chronić akumulator i uniknąć jego uszkodzenia.

PRZEGLĄD AKUMULATORA

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Wskaźnik stanu LED
3. Złącze USB-C (do ładowania akumulatora)
4. Złącze USB-A (do zasilania jednostki sterującej)




WYMIANA MEMBRAN

Potrzebne będą dwa śrubokręty TORX: T06 i T10.


Odwróć nebulizator i odkręć 8 małych śrub (przytrzymujących czarną osłonę). Dwie śruby w rogach (zaznaczone na czerwono) pozostaw na razie dokręcone.



Zdejmij klapkę (która wygląda jak okulary)
Membrany są teraz widoczne.

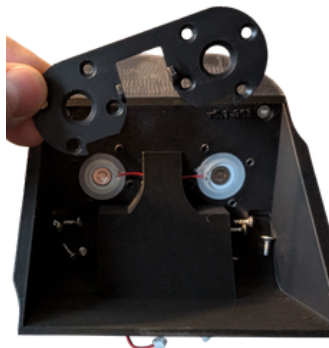


Zdejmij półprzezroczystą osłonę z zewnątrz, w miejscu, w którym znajduje się przycisk włączania/wyłączania.

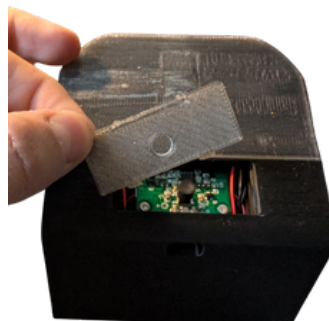


WYMIANA MEMBRAN

Odkręć obie śruby i wyjmij małą płytkę elektroniczną.

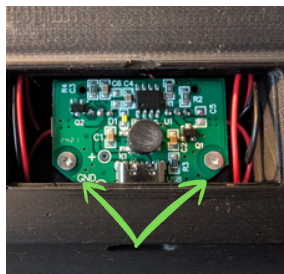

Odłącz kable od płytki. Przeciągnij kable z wtyczkami przez przewidziane do tego otwory po drugiej stronie nebulizatora.

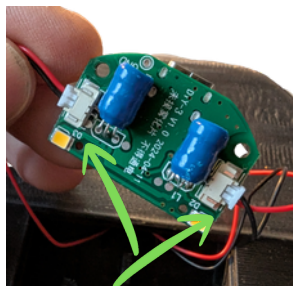

MONTAŻ – WAŻNE WSKAZÓWKI

Montaż nowych membran przeprowadza się w odwrotnej kolejności do demontażu. Należy przy tym bezwzględnie zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Membrany muszą być osadzone idealnie płasko i centralnie (na środku). Kable muszą być starannie ułożone w przewidzianych do tego małych rowkach/wyżłobieniach.
- Włóż membrany odpowiednią stroną (mocowanie kabli do membrany ma być widoczne od wewnątrz nebulizatora).
- Osłonę (klapkę dociskającą membrany) wolno przykręcać tylko bardzo delikatnie, bez użycia jakiegokolwiek siły, aby nie uszkodzić membran.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli inhalator EquiAirLite nie działa zgodnie z oczekiwaniami, prosimy sprawdzić poniższe punkty:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Akumulator jest rozładowany	Całkowicie naładuj akumulator
Brak lub bardzo słaba nebulizacja (wytwarzanie mgiełki)	Zbiornik na leki jest pusty	Napełnij zbiornik.
	Nebulizator siateczkowy jest zatkany	Dokładnie wyczyść nebulizator.
	Akumulator jest prawie rozładowany	Naładuj akumulator
	Niewłaściwy lub zbyt gęsty roztwór do inhalacji	Używaj tylko zalecanych roztworów. Skonsultuj się z weterynarzem.
Roztwór do inhalacji wycieka ze zbiornika	Pokrywa zbiornika nie jest prawidłowo zamknięta	Sprawdź pokrywę i szczelnie ją zamknij.
	Zbiornik lub uszczelka są uszkodzone	Nie używaj urządzenia. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
Urządzenie wyłącza się podczas pracy	Akumulator jest rozładowany	Naładuj akumulator

Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Model: Inhalator EquiAirLite

Pojemność zbiornika: 50 ml (zbiornik XXL)

Technologia nebulizacji: Nebulizator z podwójną siateczką (Doppel-Mesh)

Wydajność nebulizacji: Średnio 1,5 ml/min (przy NaCl 0,9%)

Wielkość cząsteczek (aerozol): Optymalnie ca. 5 μ m

Widmo aerozolu zostało sprawdzone za pomocą dyfraktometru laserowego (Spraytec).

Wielkość cząsteczek (Dv50 / MMAD) wynosi 4,9 μ m przy rozpiętości (Span) wynoszącej 1,38. Oznacza to, że 50% cząsteczek ma wielkość $\leq$ 4,9 μ m.

Poziom hałasu: < 35 dB

Waga: < 950 g (wariant: normalny)

Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania

Złącze ładowania: USB (typ C)

Czas ładowania: < 90 minut do pełnego naładowania

Obudowa: Materiał PLA odporny na wstrząsy i zachłapania

Odpowiednie substancje do inhalacji: Sól fizjologiczna, solanka, popularne płynne leki na drogi oddechowe (wymagana konsultacja z weterynarzem)

Cechy szczególne: Bezprzewodowy, bez użycia węży, mobilny

WYDAJNOŚĆ NEBULIZACJI

Przykłady

Roztwór	Wydajność (średnia)
0,9% NaCl	1,2 – 2,5ml/Min
Mucoclear 6% NaCl	0,8 – 1,9ml/Min

GWARANCJA

Na Państwa inhalator EquiAirLite udzielamy 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu, która obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych (podlegających zużyciu), takich jak nebulizator siateczkowy (Mesh). Akumulator (powerbank) jest objęty sześciomiesięczną gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, stosowaniem nieodpowiednich roztworów do inhalacji oraz wynikających z normalnego zużycia.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami, okazując dowód zakupu.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



1. Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Jednostka sterująca EquiAirLite oraz kabel to drobny sprzęt elektryczny. Symbol „przekreślonego kosza na śmieci” oznacza: Urządzeń tych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych (odpadów zmieszanych ani do żółtego pojemnika). Mają Państwo prawny obowiązek oddania zużytych urządzeń do oficjalnego punktu zbiórki lub do producenta.

2. Wbudowany na stałe akumulator

Inhalator EquiAirLite zawiera akumulator litowo-polimerowy.

3. Możliwości zwrotu dla konsumentów

Mogą Państwo bezpłatnie oddać swoje zużyte urządzenia w następujący sposób: Komunalne punkty zbiórki: W lokalnym punkcie zbiórki surowców wtórnych (np. PSZOK).

Zwrot do nas (producenta): Odbiór w systemie 1:1: Przy zakupie nowego, podobnego urządzenia przyjmujemy Państwa zużyte urządzenie do profesjonalnej utylizacji. Odbiór w systemie 0:1: Drobne urządzenia (o długości krawędzi < 25 cm) przyjmujemy z powrotem również bez konieczności zakupu nowego urządzenia (limit do trzech urządzeń danego rodzaju).

4. Ochrona danych i formalności

Ochrona danych: Za usunięcie danych osobowych ze zużytych urządzeń są Państwo odpowiedzialni osobiście.

Numer rejestracyjny WEEE:

Jesteśmy zarejestrowani w fundacji stiftung elektro-altgeräte register (EAR) pod numerem DE 48999514.

Nr rej. baterii (Batt-Reg.-Nr.): 42573338

Wskazówki dodatkowe

Zwrot ceny zakupu lub wartości końcowej po oddaniu urządzenia jest wykluczony. Przekazanie urządzenia jest ostateczne; nie ma możliwości jego ponownego wydania. Wszystkie pozostałe (nieelektroniczne) komponenty mogą być utylizowane wraz z normalnymi odpadami domowymi zgodnie z niemieckim katalogiem odpadów (AVV).



KONTAKT

Rathausgasse 5, 12529 Schönefeld, Niemcy (biuro firmy)

Wola Drzewiecka 2, 96-127 Lipce Reymontowskie (przedstawiciel w Polsce)

www.equiairlite.com

equiairlite@equiairlite.com

kontakt@equiairlite.de | [@equiairlitede](https://www.instagram.com/equiairlitede)